


# Kit de obtención de muestras vaginales

Instrucciones para la obtención por la propia paciente

visby medical™


## PASO 1 Abra el kit

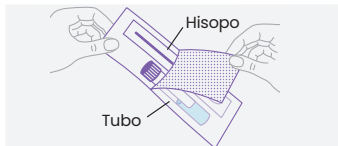

Lávese las manos y quítese la ropa de la cintura hacia abajo.

Abra el kit de obtención de muestras vaginales Visby y ponga a un lado el tubo.

## PASO 2 Desempaque el hisopo

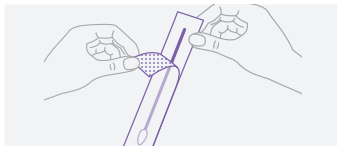

Desempaque el hisopo

⚠ No toque la punta suave del hisopo con los dedos ni con ninguna superficie. Si la toca o si el hisopo no tiene punta, deséchelo y comience nuevamente con otro kit.


## PASO 3 Sostenga el hisopo



Sostenga el hisopo en la mano colocándolo entre el pulgar y el dedo índice.

Introduzca cuidadosamente la punta suave del hisopo unos 5 cm en la abertura de la vagina.


## PASO 4 Obtenga la muestra

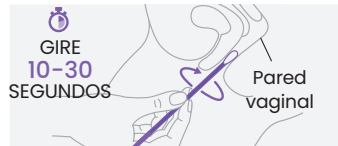

Gire suavemente el hisopo unos 10-30 segundos, asegurándose de que el hisopo toque la pared de la vagina.


⚠ Extraiga el hisopo y **sosténgalo en la mano durante el paso 5.**

## PASO 5 Abra el tubo

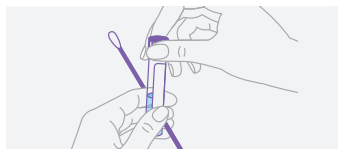

Desenrosque cuidadosamente la tapa, asegurándose de que la punta suave del hisopo no toque nada. Ponga la tapa sobre una superficie.

## PASO 6 Introduzca el hisopo

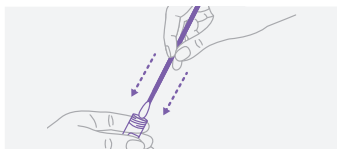

Sostenga el tubo con la abertura alejada de usted e introduzca cuidadosamente la punta suave del hisopo en el tubo.


## PASO 7 Toque el fondo con el hisopo



Toque suavemente el fondo del tubo con el hisopo durante 15 segundos. Evite salpicaduras.

**Extraiga el hisopo del tubo y deséchelo apropiadamente.**

## PASO 8 Devuelva el tubo

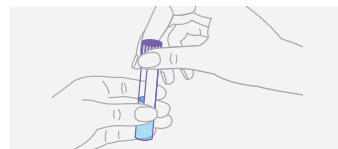







Enrosque firmemente la tapa en el tubo.

Lávese las manos con agua y jabón. Devuelva el tubo al proveedor de atención médica.

## Información importante

Para usar con la prueba de salud sexual de Visby Medical

-  Los usuarios deben leer por completo el procedimiento de obtención de muestras antes de obtenerlas por sí mismos. Consulte las instrucciones de uso del kit de obtención de muestras vaginales para obtener más información.
-  Este kit de obtención de muestras puede contener productos irritantes. No ingiera el contenido del tubo. Si el contenido del tubo le salpica a los ojos, enjuáguelos con agua. Si el contenido le salpica a la piel, lávela con agua y jabón. Si la irritación persiste, informe a un proveedor de atención médica.
-  No debe recolectar la muestra si usó los productos siguientes en el área genital durante las últimas 48 horas: duchas, lavados, lubricantes, toallitas vaginales, humectantes vaginales, antitranspirantes, desodorantes o aerosol para la higiene femenina.
-  No inserte el hisopo en la vagina más de 5 centímetros.
-  SI ESTÁ EMBARAZADA, informe a su proveedor de atención médica.
-  Antes de obtener una muestra con el hisopo vaginal, informe a su proveedor de atención médica si tiene:
  - dolor pélvico reciente
  - dolor durante las relaciones sexuales
  - secreción vaginal inusual o mal olorEstos síntomas pueden deberse a la enfermedad inflamatoria pélvica (EIP). El diagnóstico y tratamiento oportunos de la EIP pueden prevenir la infertilidad y el embarazo ectópico asociados con la EIP.



Visby Medical, Inc.  
3010 North First Street  
San Jose, CA 95134



Rx Only



Para obtener información adicional, consulte las instrucciones de uso del kit de obtención de muestras vaginales de salud sexual de Visby Medical (<https://www.visby.com/vaginal-collection-ifu/>). Se puede solicitar una copia impresa al Servicio de atención al cliente de Visby Medical, llamando al número **1-833-468-4729 (1-833-GoVisby)** o en [support@visby.com](mailto:support@visby.com).