



مرحله 1 کیت را باز کنید

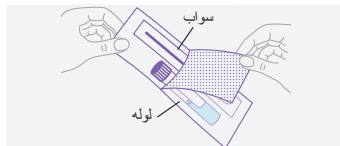

دستان خود را بشویید و لباس‌های خود را از کمر به پایین درآورید.


کیت جمع آوری نمونه واژینال Visby را باز کنید و لوله را کنار بگذارید.

مرحله 5 لوله را باز کنید

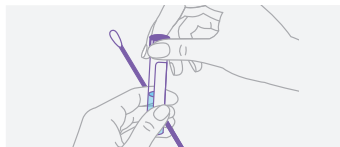

درپوش را با دقت باز کنید و در ضمن مراقب باشید نوک نرم سواب به چیزی برخورد نکند. درپوش را پایین بگذارید.


مرحله 2 سواب را از جلد خارج کنید

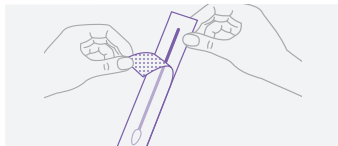

سواب را از جلد درآورید.

⚠ نوک نرم سواب را با انگشت لمس نکنید یا آن را بر روی هیچ سطحی قرار ندهید. اگر این کار را کردید یا اگر سواب نوک نداشت، آن را دور بیندازید و با یک کیت جدید نمونه‌گیری را از سر بگیرید.

مرحله 6 سواب را وارد کنید

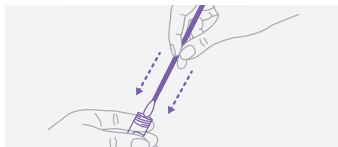

دهانه لوله را دور از خود نگه دارید و نوک نرم سواب را با دقت داخل لوله فرو کنید.

مرحله 3 سواب را نگه دارید



سواب را با بین انگشت شست و سبابه دست خود نگه دارید.

با دقت، نوک نرم سواب را تا حدود 2 اینچ در دهانه واژن فرو کنید.

مرحله 7 به سواب ضربه بزنید



به مدت 15 ثانیه و به آرامی سواب را به ته لوله بزنید. از پاشیدن مایع خودداری کنید. سواب را از لوله بیرون آورید و آن را در جای مناسبی بیندازید.


مرحله 4 نمونه را جمع آوری کنید



به آرامی سواب را به مدت 10-30 ثانیه بچرخانید، مطمئن شوید که سواب با دیواره‌های واژن در تماس باشد.

⚠ سواب را خارج کنید و در طی انجام مرحله 5 آن را در دست خود نگه دارید.

مرحله 8 لوله را برگردانید

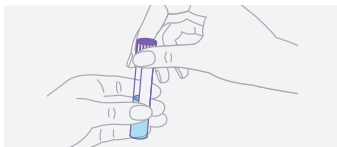

درپوش را محکم بر روی لوله ببندید.

دستان خود را با آب و صابون بشویید. لوله را به ارائه‌دهنده مراقبت‌های بهداشتی خود برگردانید.

اطلاعات مهم

برای استفاده با تست پزشکی سلامت جنسی Visby

⚠️ کاربران قبل از گرفتن نمونه از خود، باید فرآیند جمع آوری را به طور کامل مطالعه کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً به دستورالعمل مربوط به کیت جمع آوری نمونه واژینال مراجعه کنید.

⚠️ این کیت جمع آوری نمونه ممکن است حاوی مواد محرک باشد. محتویات لوله خوردنی نیستند. در صورت پاشیده شدن محتویات لوله در چشم شما، چشمان خود را با آب بشویید. اگر محتویات بر روی پوست شما پاشیده، محل را با آب و صابون بشویید. در صورت ادامه یافتن سوزش، به یک ارائه دهنده مراقبت‌های بهداشتی اطلاع دهید.

⚠️ اگر ظرف 48 ساعت گذشته از موارد زیر در ناحیه تناسلی استفاده شده باشد، نمونه نباید جمع آوری شود. شستشوی واژن، مایع شستشو، لوبریکانت، دستمال واژن، مرطوب کننده واژن، ضد تعریق، نودودرانت یا اسپری بهداشتی زنانه.

⚠️ سواب را بیش از حدود 2 اینچ داخل واژن فرو نکنید.

⚠️ در صورت بارداری، لطفاً به ارائه دهنده مراقبت‌های بهداشتی خود اطلاع دهید.

⚠️ قبل از جمع آوری نمونه سواب واژینال، در صورت داشتن موارد زیر پزشک خود را در جریان بگذارید:

- درد لگن در روزهای اخیر
- درد هنگام مقاربت جنسی
- ترشحات غیر معمول واژن یا بوی بد

این علائم ممکن است به دلیل بیماری التهابی لگن (PID) باشند. تشخیص و درمان سریع PID می‌تواند در جلوگیری از ناباروری و حاملگی خارج رحمی مرتبط با PID مؤثر باشد.

Visby Medical, Inc.
3010 North First Street
San Jose, CA 95134



Rx Only



برای کسب اطلاعات بیشتر، به دستورالعمل استفاده از کیت جمع آوری نمونه واژینال سلامت جنسی پزشکی (IFU - vaginal-collection) مراجعه کنید. [Visby \(https://www.visby.com/vaginal-collection\)](https://www.visby.com/vaginal-collection) مشتری پزشکی Visby به شماره برای دریافت یک نسخه چاپ می‌توانید. درخواست خود را با بخش پشتیبانی از مشتری پزشکی Visby به شماره **1-833-468-4729** یا **support@visby.com** یا **(1-833-GoVisby)** در میان بگذارید.