



### 1단계 키트 개봉

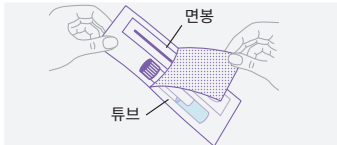

손을 씻고 허리 아래를 탈의합니다.

Visby 질 검체 채취 키트를 개봉하고 튜브를 따로 놓으십시오.

### 2단계 면봉 포장 개봉

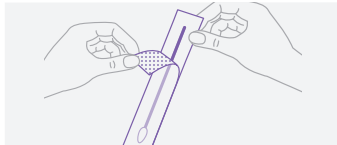

면봉을 개봉합니다.

**▲** 면봉의 부드러운 솜 부분에 손가락이나 다른 표면이 닿지 않도록 하십시오. 만약 닿거나 면봉에 솜이 없다면, 버리고 새로운 키트로 다시 시작하십시오.

### 3단계 면봉 잡기



엄지와 검지로 면봉을 잡아 손에 잡니다.

질의 입구에 면봉의 부드러운 솜 부분을 약 2인치 정도 조심스럽게 삽입합니다.


### 4단계 샘플 채취



면봉이 질벽에 닿도록 하면서 면봉을 10~30초 동안 부드럽게 돌리십시오.


**▲** 면봉을 꺼낸 후 **5단계 동안 손에 들고 계십시오.**

### 5단계 튜브 개봉

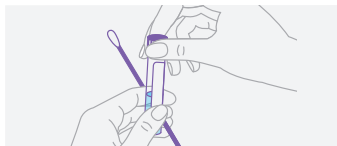

면봉의 부드러운 솜 부분에 아무것도 닿지 않도록 주의하면서 뚜껑을 조심스럽게 돌려서 여십시오. 뚜껑을 내려놓습니다.

### 6단계 면봉 삽입

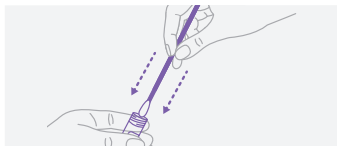


튜브 입구를 자신에게서 멀리 향하게 한 후 면봉의 부드러운 솜 부분을 튜브에 조심스럽게 넣습니다.

### 7단계 면봉을 가볍게 두드리기



면봉을 튜브 바닥에 15초 동안 가볍게 두드립니다. 튀지 않도록 주의하십시오. **면봉을 튜브에서 꺼내 적절히 폐기합니다.**

### 8단계 튜브 반환

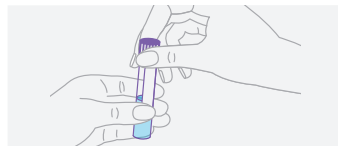

튜브의 뚜껑을 돌려서 단단히 닫습니다.


물과 비누로 손을 씻습니다. 튜브를 의뢰 제공자에게 반환합니다.

# 성 건강

## 중요한 정보

### Visby Medical 성 건강 검사용

 사용자는 검체 자가 채취를 수행하기 전에 전체 채취 절차를 읽어야 합니다. 자세한 정보는 질 검체 채취 키트 사용 설명서를 참조하십시오.

 이 검체 채취 키트에는 자극 물질이 포함되어 있을 수 있습니다. 튜브의 내용물을 섭취하지 마십시오. 튜브의 내용물이 눈에 튀었을 경우 눈을물로 씻으십시오. 내용물이 피부에 튀었을 경우 비누와 물로 씻으십시오. 자극이 계속되면 의료 제공자에게 알려십시오.

 지난 48시간 이내 다음 제품을 생식기 부위에 사용한 경우 샘플을 채취해서는 안 됩니다: 질 세정제, 세정제, 윤활제, 질용 물티슈, 질 보호제, 발한억제제, 탈취제 또는 여성용 위생 스프레이.

 면봉을 질에 약 2인치 이상 삽입하지 마십시오.

 임신 중인 경우 의료 제공자에게 알려십시오.

 질 면봉 검체를 채취하기 전에 다음 증상이 있는 경우 의료 제공자에게 알려십시오.

- 최근 골반 통증
- 성교 시 통증
- 비정상적인 질 분비물 또는 약취

이러한 증상은 골반 염증성 질환(PID)으로 인한 것일 수 있습니다. PID의 신속한 진단과 치료가 PID와 관련된 불임 및 자궁 외 임신을 예방하는 데 도움이 될 수 있습니다.



Visby Medical, Inc.  
3010 North First Street  
San Jose, CA 95134



Rx Only



추가 정보는 Visby Medical 성 건강 질 검체 채취 키트 사용 설명서(<https://www.visby.com/vaginal-collection-ifu/>)를 참조하십시오.

인쇄된 사본은 1-833-468-4729(1-833-Go Visby)번으로 또는 [support@visby.com](mailto:support@visby.com)으로 Visby Medical 고객 지원팀에 요청할 수 있습니다.