



BUÑTEN 1 Kõbellok Kein Kõmadmõd eo

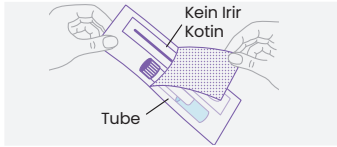

Kwal beim innem jolok aaleb nukruk ko jen katim lallok.

Kõbelloke Kein Kõmadmõd in Bõk Jenkwan in Enbwin eo an Visbly, innem liküt im kõjenolok tube eo.


BUÑTEN 2 Kõbelloke Kilin Kein Irir Kotin eo

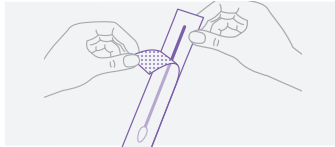

Jolok kilin pakij eo an kein irir kotin eo.

⚠ Jab jibwe bar emeomeo eo an kein irir kotin eo kin adiin beim ak ioon jabdewõt jikin ko. Ñe kwõnaj jibwe ak ñe ejellok bõran kein irir kotin eo, joloke im bar jinoe kin juon kein kõmadmõd kää.

BUÑTEN 3 Jibwe Kein Irir Kotin eo

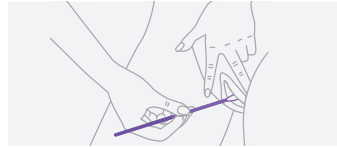

Jibwe kein irir kotin eo kin beim ilo am liküt kõtaan addi lab im addi eo iturin.

Kõkmanman am kadeloñ bõran kein irir kotin eo emeoeo emaron 2 inij jen an deloñ ilo jikin eo ettino an kora.


BUÑTEN 4 Bõke Jaambol eo



Kõkmanman am kõroolole kein irir kotin eo iomwin 10-30 jekon, lolorjak an bar eo añuri dābin ko ilo jikin eo ettino an kora.


⚠ Kadiwõj kein irir kotin eo **im liküt wõt ilo beim ilo ien am kõmmane Buñten 5.**

BUÑTEN 5 Kõbelloke Tube eo

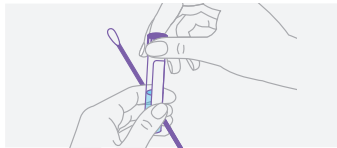

Kõkmanman am timi bõran jikru eo im lolorjak ke bõran kein irir kotin eo ejab añur jabdewõt. Lelallok bõran bato eo.

BUÑTEN 6 Kadeloñ Kein Irir Kotin eo

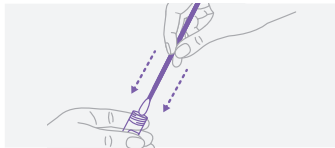


Jibwe mejan tube eo ilo an jab jit waj ñan kwe im kõkmanman am kadeloñ bõran kein irir kotin eo ñan iloan tube eo.

BUÑTEN 7 Jidik Wõt am Jibed Kein Irir Kotin eo



Kõkmanman im jidik wõt am jibed kein irir kotin eo ilo kabin tube eo iomwin 15 jekon. Lale an jab bütük dān. **Kadiwõj kein irir kotin eo jen iloan tube eo im kajimwe am jolok.**

BUÑTEN 8 Karool Tube eo

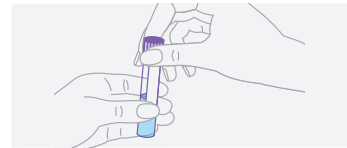

Kabine am jikruki bõran tube eo.

Kwal beim kin joob im aeboj, Karoollok tube eo ñan taktõ eo am.

Ejmour im Nañinmij ko an Jiron im Likao

Melele Aurok

Ñan Kójerbatl ibben Teej eo an Visby Medical ñan late Ejmour im Nañinmij ko an Jiron im Likao



Ro rej kójerbale rej aikuj ritti aaleben wáween bók jaambol in mokta jen aer make kómadmód eo ñan bók jenkwán in kobbán enbwín eo. Jouj im late Kómelele ko kin Wáween Kójerbatl Kein Kómadmód in Bók Jenkwán in Enbwín eo an Visby ñan melele ko relabliok.



Kein kómadmód in bók jenkwán in kobbán enbwín in emaron wór bajjin iloan. Jab idaake dān ko kobbán tube eo. Ñe dān ko kobbán tube eo renaj bütük ñan iloan mejam, kwal mejam kin aeboj. Ñe dān ko renaj bütük ñan kilim, kwale kin joob im aeboj. Ñe ejab bójtrak am abnónó, ba ñan juon taktó.



Jab bók jaambol elañe emój am kójerbatl mweeluk kein lajtrak iloan awa ko 48 remootlok: kein karreo ko an kora, kein kwal jikin eo an kora, kein kajir, kein irir ko an jikin eo ettino ibben kora, kein kameameo ko an jikin eo ettino ibben kora, kein kano bwín jikin eo ettino ibben kora, kein kómedwan ko, ak bütük ko an kora an jikin eo ettino ibben kora.



Enjab labliok jen 2 injij an mwilal am kadeloñ kein irir kotin eo ñan iloan jikin eo ettino ibben kora.



ÑE KWÓBÓRORO, jouj im ba ñan taktó eo am.



Mokta jen am bók jenkwán in kobbán enbwín jen jikin eo ettino ibben kora kin kein irir kotin, ba ñan taktó eo elañe ewór melele kein ibbam:

- metak bajjin ilo raan ko rej kab jemlok
- metak ilo ten an ruo armijj bed ibben doon
- ejab ekká an diwójok dān ak nana bwín jen jikin eo ettino ibben kora.

kakólkól kein remaron walok jen nañinmij ko ilo bajin jiron (pelvic inflammatory disease, PID). Kaju kakólkól im kómadmóde PID kin wúno emaron jibañ bóbrae jen waróñe im ien ko ewór jorráan ilo bóroro im rej walok jen PID.



Visby Medical, Inc.
3010 North First Street
San Jose, CA 95134



Rx Only



Ñan melele ko relabliok, late Kómelele ko ñan Wáween Kójerbatl Kein Kómadmód in Bók Jenkwán in Enbwín eo an Visby Medical ñan late Ejmour im Nañinmij ko an Jiron im Likao
(<https://www.visby.com/vaginal-collection-ifu/>).

Kwómaron kajitóke juon kabe in jeje ko jen jikin jibañ Customer eo an Visby Medical ilo
1-833-468-4729 (1-833-GoVisby) ak support@visby.com.